

mizma

beauty

# ЖИРНИЙ НАГАР

**ЧОМУ ВІН З'ЯВЛЯЄТЬСЯ  
В СЕРЕДИНІ СУХОЖАРУ**

## СУХОЖАР НЕ Є ДЖЕРЕЛОМ НАГАРУ

Сам стерилізатор не виділяє жодних речовин, які могли б утворити жирний наліт. У ньому просто немає рідких або смолянистих компонентів, що плавляться чи випаровуються.

Відповідно, причина завжди зовнішня.

## 1. НЕПРАВИЛЬНА ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНА ОБРОБКА (ПСО):

Одна з найпоширеніших причин появи нагару — помилки під час ПСО.

- **Погано змитий дезінфікуючий засіб.**

Після етапу дезінфекції інструменти обов'язково потрібно ретельно промити під проточною водою, бажано зі щіточкою. Якщо залишити на них навіть незначну кількість деззасобу, при нагріванні він може випаруватись і осісти у вигляді жирного нальоту на стінках камери.

- **Недостатнє висушування інструментів.**

Інструменти перед закладанням у сухожар мають бути **абсолютно сухими**. Якщо на них залишається волога — це може спричинити утворення конденсату та жироподібного нальоту, який поступово накопичується в камері.

### **Які наслідки для самої техніки?**

Такі відкладення можуть не тільки залишатися на стінках, а й проникати всередину корпусу стерилізатора — до електронних компонентів. Це загрожує серйозними поломками, що потребують ремонту, а також можуть вивести стерилізатор із ладу.

## 2. НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ:

Дуже важливо звертати увагу на **склад деззасобу** та на його поведінку під впливом високих температур.

### НАПРИКЛАД

Деякі засоби мають компоненти, які не випаровуються повністю, а при нагріванні осідають на інструментах і поверхнях у вигляді липкого нальоту.

За багаторічний досвід спілкування з майстрами манікюру та іншими спеціалістами ми зібрали чимало відгуків, і на їх основі можна зробити висновки:

- **“Бланідас”** часто викликає появу жирного нальоту навіть після ретельного промивання — багато майстрів скаржаться на сліди в камері стерилізатора після його використання.



- Водночас **“Сурфаніос”** отримав багато позитивних відгуків — він не залишає подібних слідів і добре підходить для інструментів, які проходять термічну стерилізацію.

*\*згадані в тексті засоби наведені виключно як приклади і не є рекламою чи єдино правильним вибором.*

### 3. НЕЯКІСНІ КРАФТ-ПАКЕТИ:

Пакети поганої якості можуть містити багато клею або бути зроблені з паперу, який не витримує високих температур. При стерилізації вони можуть виділяти жироподібні сліди.

У нашій лабораторії ми тестуємо різні пакети, і, **на жаль, частина з них не відповідає санітарним нормам.**


Серед перевірених варіантів можемо виділити пакети **ProSteril**.

Виготовлені з медичного паперу преміальної якості, відповідають міжнародним стандартам СЕ і пройшли випробування у наших умовах.



## ЯК ПЕРЕВІРИТИ КРАФТ-ПАКЕТИ САМОСТІЙНО:

Проведіть стерилізацію з порожнім пакетом. Якщо на його краях з'являються **плями або потьоки клею** — ці пакети краще не використовувати.

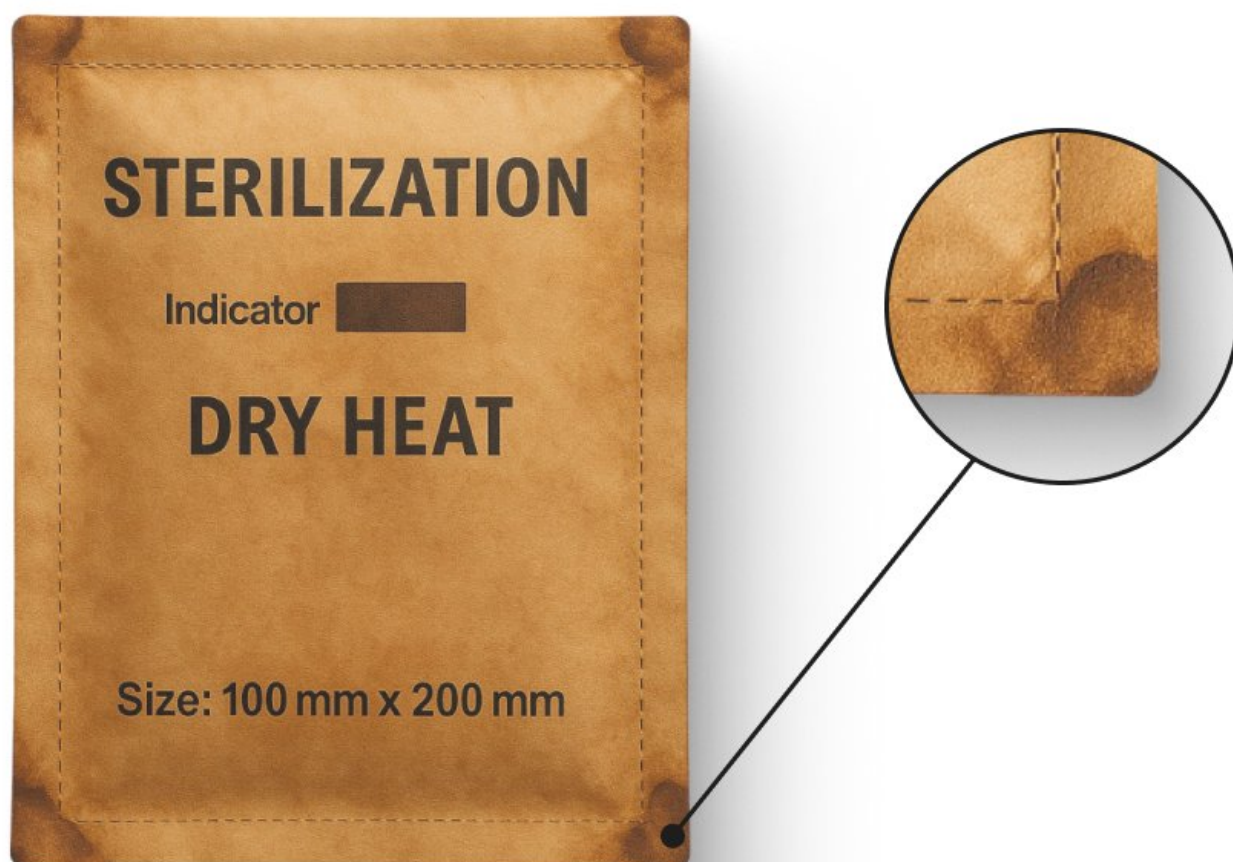

**Важливо знати:** будь-які крафт-пакети залишають сліди у камері. Про це мало говорять, але це правда. Клей, який використовують для пакування, поступово накопичується всередині камери стерилізатора у вигляді нагару.

**Тому стерилізатор потрібно регулярно очищувати зсередини**, так само як духовку на кухні. Для цього підійдуть різні методи і засоби. Від себе можемо рекомендувати **очищення за допомогою Dezik Instrum.**

## 4. НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО ПАТРУБКА

На задній стінці кожного сухожару є клапан **(вихідний патрубок)**.

Він має бути **закритим на всіх режимах, крім режиму сушки** — тоді його обов'язково відкриваємо.



Ігнорування цього правила може призвести до поломки стерилізатора.

## ЯКЩО ВИ ДОТРИМУЄТЕСЬ УСІХ ПРАВИЛ, АЛЕ НАЛІТ УСЕ ОДНО З'ЯВЛЯЄТЬСЯ:

- Зверніться до сервісного центру.
- Якщо використовували неякісні засоби і жирний нагар вже проник усередину корпусу, **можете надіслати стерилізатор до нас на завод.** Ми проведемо технічне обслуговування, розберемо пристрій, очистимо його зсередини та надішлемо вам назад — **чистий, справний і красивий.**

mizma

beauty

# СУХОЖАР — ЯК ХОРОШЕ АВТО:

Працює бездоганно, коли про нього  
дбають. Регулярна перевірка, якісні  
витратні матеріали й чиста камера  
- запорука його довгого й надійного  
життя.

